


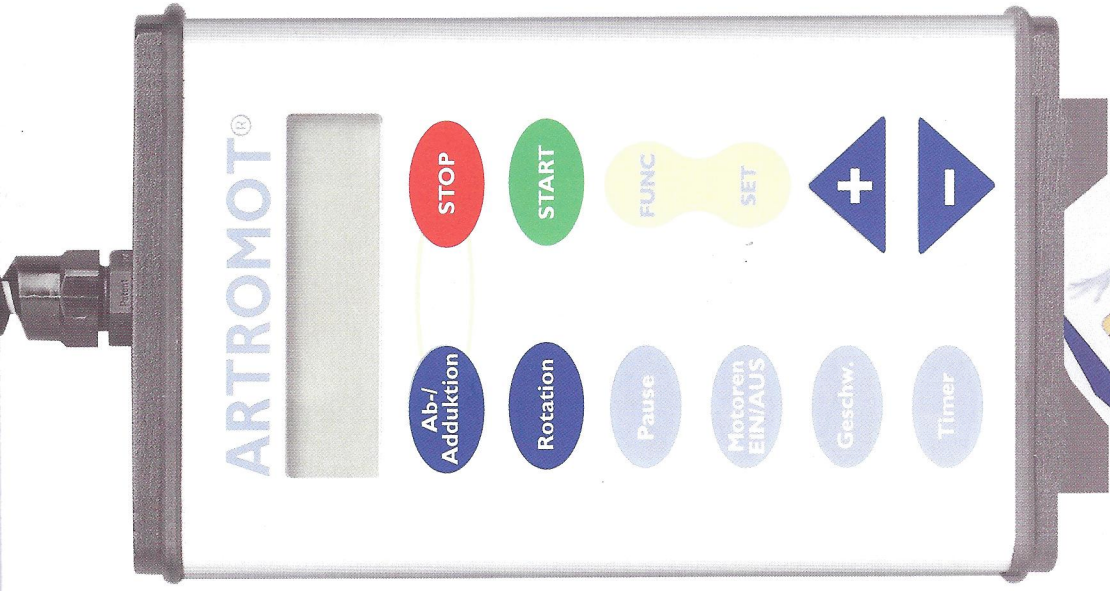


Abduktion =
seitliches Heben des Armes

Adduktion =
seitliches Senken des Armes

Innenrotation =
Drehen des Armes nach innen

Außenrotation =
Drehen des Armes nach außen

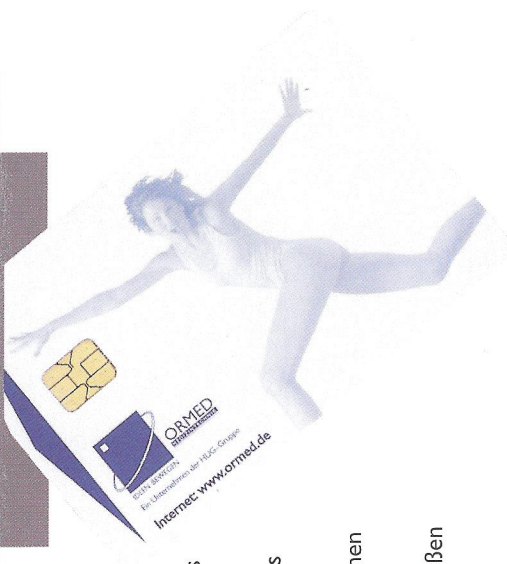

ARTROMOT®-S2 PRO®

Kurzanleitung¹ zur Handprogrammierungseinheit

- 1. Netzstecker einstecken.
- 2. ARTROMOT®-S2 PRO Netzschalter einschalten.
- 3. Patienten-Chipkarte in den dafür vorgesehenen Schlitz stecken.
- 4. Starten: **START** drücken.
- 5. Stoppen: **STOP** drücken.
- 6. Zuerst gleichzeitig **Ab-/Adduktion** **STOP** kurz drücken.
(Auf der Anzeige steht jetzt **Adduktion**), dann
- 6.1 Seitliches Senken des Armes (**Adduktion**)² einstellen:
+/- zum Verändern der Werte drücken.
- 6.2 Seitliches Heben des Armes (**Abduktion**)² einstellen:
erneut **Ab-/Adduktion** drücken, **+/-** zum Verändern der Werte drücken.
- 6.3 Speichern der Einstellungen
STOP drücken. Zum Starten des Gerätes **START** drücken.
- 7. Drehen des Armes nach innen und aussen
(Innen- und Außenrotation)² werden wie Schritt 6 eingestellt.
Taste **Rotation** drücken.

Starten/Stoppen

Programmieren

Achtung: Sie verändern beim Programmieren immer den Wert, der auf der Anzeige steht.

¹ Diese Beschreibung bezieht sich ausschließlich auf ARTROMOT®-S2 PRO von ORMED.
Die Kurzanleitung ersetzt nicht die Gebrauchsanweisung und ärztliche Einweisung.
² Bewegung, wenn nicht anders verordnet, immer im schmerzfreien Bereich ausführen.